




- Port de gants non stériles.
- Désinfection large du site de ponction. Bien laisser sécher l'antiseptique (risque d'hémolyse)
- Ne jamais palper le site après désinfection.
- Le garrot ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine. **Le relâcher dès que le sang s'écoule dans le 1^{er} tube. Si le bras est comprimé pendant plus de 1 minute les résultats d'analyses peuvent être modifiés (hémolyse +++, hémococoncentration, début de coagulation).**
- Choix du site de ponction : ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.
- Maintenir le tube en dessous du point de ponction.
- Lors du prélèvement positionner le tube, étiquette vers le bas, pour pouvoir visualiser l'arrivée du sang dans le tube.



- Veiller au bon remplissage des tubes (citrate +++).
- Il est recommandé d'homogénéiser le tube dès le retrait du corps de prélèvement par **5 à 6 retournements lents minimum (idéal = 8).**
- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

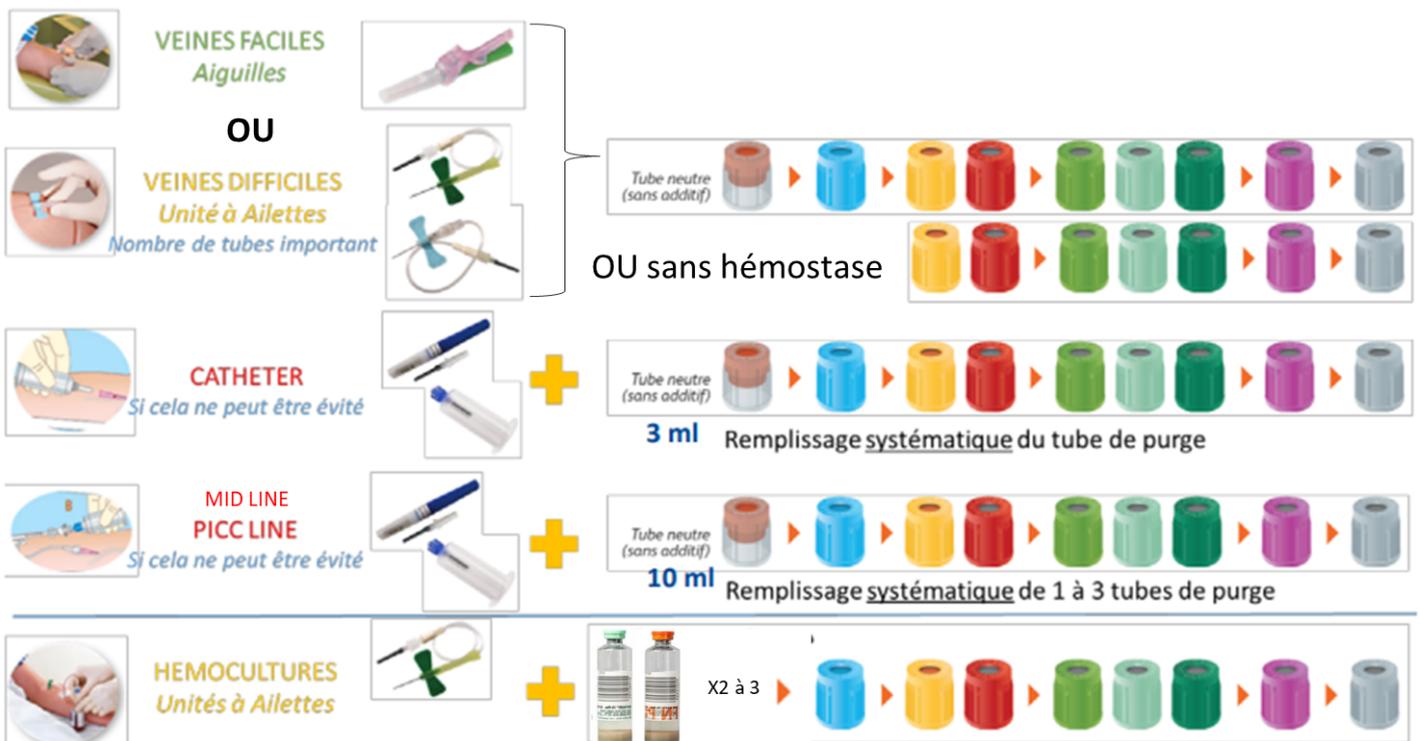